


一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

# DWX-4

[ 販売名 ] 歯科用CAD/CAMマシン DWX-4


 KATANA®

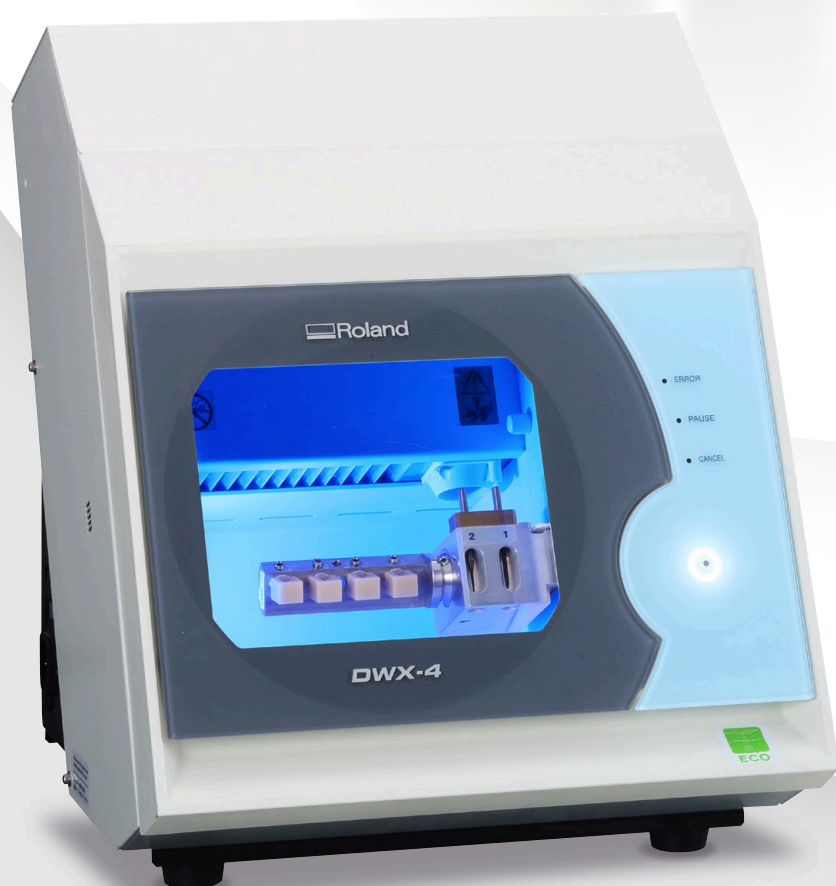

省スペース設計のミリングマシンです。  
「デントミル4」とあわせて使用することで  
「カタナ®アベンシア®ブロック」に最適な  
加工が行えます。

## ● 場所を選ばないコンパクト設計

340×365×405mmのコンパクト設計。

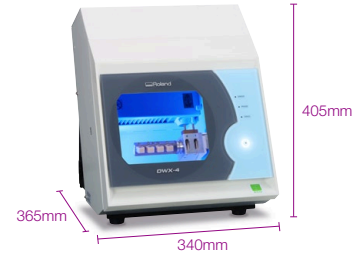

## ● 「カタナ®アベンシア®ブロック」を4本装着可能


「カタナ®アベンシア®ブロック」は4本まで装着可能です。(装着には「DWX-4 ピンタイプジグ」が必要です。)



DWX-4 ピンタイプジグ

## ● 4軸加工&自動工具交換機能


小型ながら4軸加工機能や自動工具交換機能(ATC)が標準装備されており「カタナ®ミリングバー」が2本まで装着可能です。

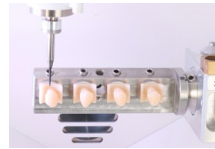

4軸加工機能




自動工具交換機能(ATC)

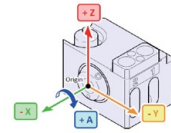


## ● 専用ソフト「デントミル4」

「デントミル4」は「カタナ®」システムで採用している高性能CAMソフト「デントミル コンプラス」を「カタナ®アベンシア®ブロック」加工用にカスタマイズしたソフトです。

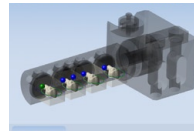

デントミル4  
【販売元】クラレノリタケデンタル株式会社

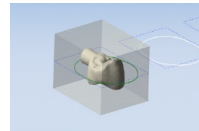

Roland

### 歯科用CAD/CAMマシン DWX-4

一般医療機器  
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
医療機器届出番号: 22B3X1006000050  
【製造販売元】ローランド ディー.ジー. 株式会社  
静岡県浜松市北区新都田 1-1-3

※「DWX-4」を動作させるには集塵装置(別売)が必要です。

外形寸法	幅×奥行×高さ: 340×365×405mm
重量	約22kg
電気規格	AC100 ~ 240V 50/60Hz
消費電力	約70W
使用環境条件	温度: 5 ~ 40°C 湿度: 35 ~ 80% (結露のないこと)

### 関連製品




### カタナ®アベンシア®ブロック

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料  
医療機器認証番号: 226AFBZX00116000

【単品】切削加工用レジン... 5個/箱

(種別: 色調)  
(12: A2 LT, A3 LT, A3.5 LT)  
(12: A3 OP)  
(14L: A2 LT, A3 LT, A3.5 LT)  
(14L: A3 OP)

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28

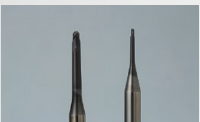

### カタナ® ミリングバー

一般医療機器 歯科用研削器材  
医療機器届出番号: 15B1X10001330011

【単品】φ2.0 mm ダイヤモンドコート / φ1.0 mm ダイヤモンドコート

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28

「カタナ®アベンシア®ブロック」の  
切削にお使いください。

●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。



製品・各種技術  
に関する  
お問い合わせ

## 》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜~金曜 10:00~17:00 [www.kuraraynoritake.jp](http://www.kuraraynoritake.jp)

製造販売元 **ローランド ディー.ジー. 株式会社**

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-1-3

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)  
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525  
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161  
お客様相談センター: 0800-222-8020  
<http://www.dental-plaza.com>