

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号22B3X10020000102
[販売名] 歯科用CAD/CAMマシン DWX-52Di DGSHAPE

DWX-52Di-Jp



保険CAD/CAM冠の登場以降、高機能なハイブリッドレジン材料が次々と登場し、
口腔内の多くの部位・症例に適応範囲が拡大しました。


経済性と機能性を両立

用途をピン付き材料の加工用途に絞り込み、導入コストを抑えました。
新規導入にも、増設導入にも、経済性と機能性を両立したマシンです。

加工可能材料



カタナ® アベンシア® Pブロック カタナ® アベンシア® ブロック 2 カタナ® アベンシア® N

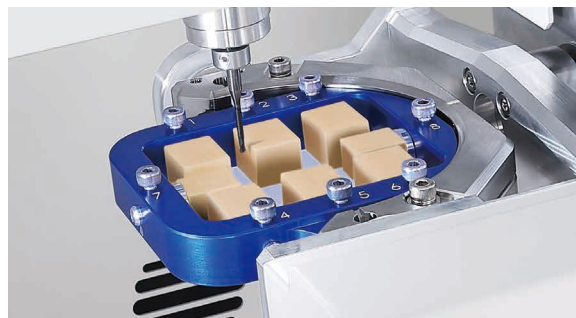

「カタナ®」ブランドマテリアルを高精度に加工

「hyperDENT®」には、「カタナ®」ブランドマテリアル用の切削モジュールが搭載されています。歯科用CAD/CAMマシン DWXシリーズと組み合わせることでより高精度な加工が可能です。審美的にも強度的にも優れた、「カタナ®」ブランドマテリアルの特徴を最大限に発揮できるCAMソフトです。



【製造元】株式会社フォローミーテクノロジージャパン
〒108-0022 東京都港区海岸3-24-18
ラシクラス EX 東京ベイ 601号室


オートツールチェンジャー

工程に応じてミリングバーを自動で交換するオートツールチェンジャー(ATC)を搭載。最大で15本のミリングバーをセット可能です。



稼働マネジメントクラウドサービス「DGSHAPE Insights」

不具合の発生時には DGSHAPE Insights で得られた情報により、迅速なメンテナンスとサービスの提供が可能となります。さらにラボにあるDWXシリーズ*の稼働状況を把握し、加工計画やメンテナンス計画の策定など、生産マネジメントをサポートします。

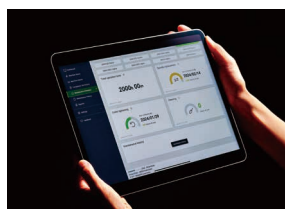

*対応モデル: DWX-53DC / 53D / 52DCi / 52DC / 52D / 52Di-Jp / 43W / 42W / 4

集塵効率の良い機内構造

コンパクトサイズのボディでありながら、清掃やメンテナンスのしやすい機内構造と、粉塵を効率的に回収するエアフロー構造を両立しています。



DWX-52Di-Jp

■販売名

歯科用CAD/CAMマシン DWX-52Di DGSHAPE
医療機器届出番号: 22B3X10020000102

■製造販売元

DGSHAPE 株式会社
〒431-2103
静岡県浜松市浜名区新都田1-1-2



取り付け可能な材料形状	ピン付材料 ピン直径 6 mm
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	495 × 660 × 600 mm
重量	67 kg
電源条件	AC100 V ± 10 %、50/60 Hz
消費電力	約 200 W
付属品	電源コード、電源プラグアダプター、USBケーブル、マニュアル DGSHAPE Software Package CD、検出ピン、自動補正用治具 ピン付材料用アダプター (2個)、六角ドライバー、スパナ、ミリングバーホルダー ミリングバー位置決め治具、集塵ホース、集塵ホースアダプター、レギュレーター など

※本機では、圧縮空気が必要です。コンプレッサーは別途、ご用意いただく必要があります。
※本機サポート期間は生産終了から7年となります。※動作には集塵装置 (別売) が必要です。※導入に際しては保守契約が必要です。

- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 歯科用CAD/CAMマシン DWX-52Di DGSHAPE 一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号: 22B3X10020000102
- カタナ® アベンシア® ブロック 2 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 302AFBZX00019Z00
- カタナ® アベンシア® P ブロック 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 229AFBZX00091Z00
- カタナ® アベンシア® N 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 301AFBZX00015Z00

クラレリタケデンタル株式会社

医療関係者窓口

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00
〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【販売元】株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

クラレリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!

「アベンシア」は株式会社クラレの登録商標です。
「カタナ」は、リタケ株式会社登録商標です。
「hyperDENT」は株式会社フォローミーテクノロジージャパンの登録商標です。