

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：226AFBZX00116000

保険適用*

カタナ® アベンシア® ブロック

ユニバーサル用

小臼歯対応

CAD/CAM冠用 材料 (I)

当社独自の製造技術により
超微粒子フィラーを高密度に配合
強度と滑沢耐久性を両立
ML (マルチレイヤー) をラインナップに追加




当社独自の製造技術により誕生したCAD/CAM冠用ブロック

単層に加え、ML(マルチレイヤー)をラインナップに追加

滑らかなグラデーションを有する小臼歯クラウンをシンプルな作業で実現

マルチレイヤード構造によるグラデーション


当社独自の製造技術により、各層の移行部が滑らかなグラデーションを有しています。

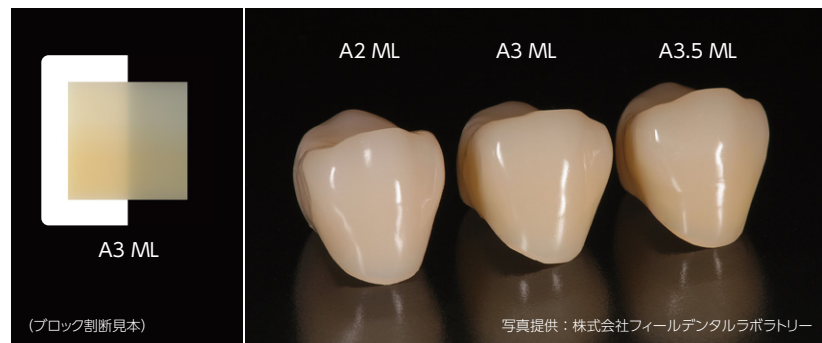

● ラボサイド/チェアサイドでの優れた研磨性

「カタナ® アベンシア® ブロック」の単層と同様に超微粒子フィラー*の高密度配合により、技工操作及び咬合調整後の研磨性に優れています。

*超微粒子フィラー（アルミナフィラー（酸化アルミニウム）：20nm、シリカフィラー（軽質無水ケイ酸）：40nm）

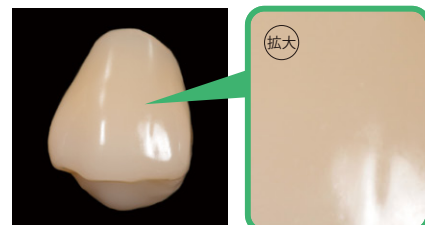

研磨後の表面状態 (A3 ML)

研磨方法：カーボンドラムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨


使用ステップの概要

※ご使用に際しましては製品の添付文書を必ずお読みください。




管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：226AFBZX00116000

カタナ® アベンシア® ブロック ユニバーサル用

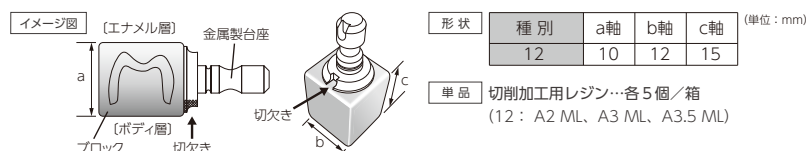

金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。CAD/CAM装置の設定により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。設計・加工前に、加工の可否をCAD/CAM装置の購入先にご確認ください。

関連製品

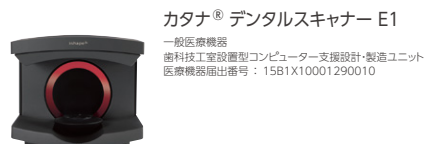

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

クラレノリタケデンタル公式アプリ



クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上