



ノリタケ シェードガイド

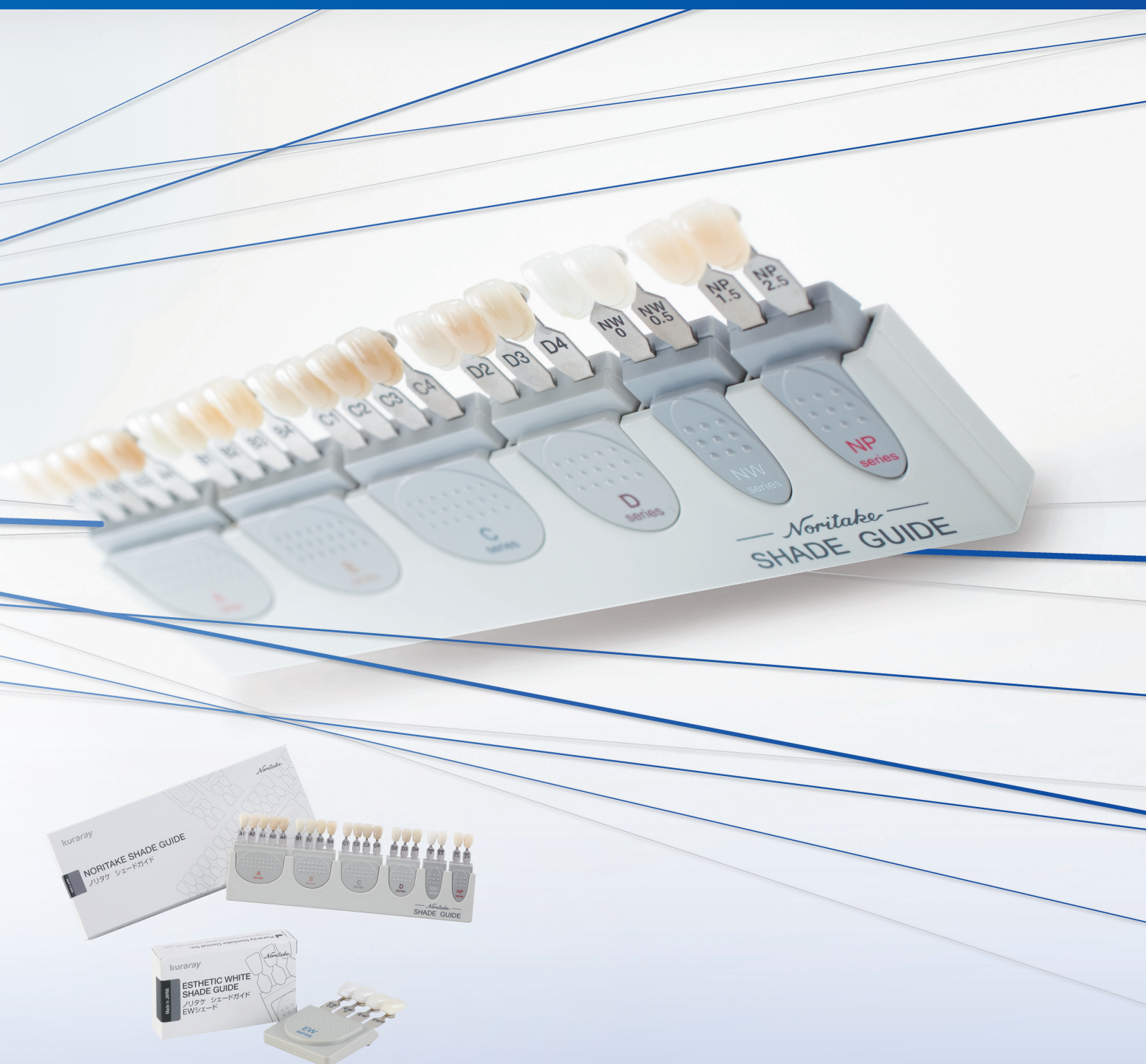

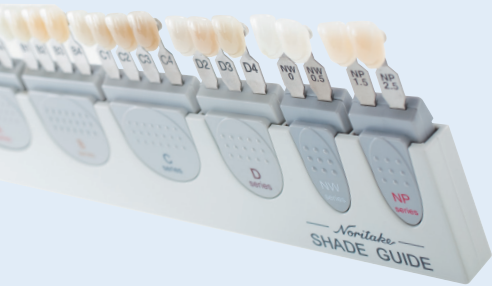

「ノリタケ シェードガイド」は、チェアサイドとラボサイドのコミュニケーションがよりスムーズとなり、「ノリタケ スーパーポーセレン AAA」、「セラビアン® ZR」、「セシード® N」※、「エステニア® C&B」※の色調もさらに再現しやすくなります。

※「セシード® N」、「エステニア® C&B」では一部対応していない色調がございます。



ノリタケ シェードガイド

ベーシックシェード

A・B・C・Dの4シリーズ16色で構成されています。

オリジナルシェード

NP シリーズ

天然歯に多く見られる色相を持つシリーズで、Aシェードよりピンク色が強調されています。

NP1.5 彩度が、A1とA2の中間に位置する色調です。

NP2.5 彩度が、A2とA3の中間に位置する色調です。

NW シリーズ

ホワイトニングシェードです。

NW0 B1よりさらに明るい色調です。

NW0.5 A1よりさらに明るい色調です。
NW0と比較し、若干彩度を高めた色調です。

※「セシード® N」、「エステニア® C&B」は、NPシリーズ及びNWシリーズには対応しておりません。



ノリタケ シェードガイド EWシェード

EW シリーズ

NWシリーズより、さらに白さを強調したホワイトニングシェードです。

EW00 ノリタケ全シェードの中で最も明度が高い(明るい)色調です。

EW0 2番目に明度が高い(明るい)色調です。

EW 明度はNW0と同等の色調です。

EWY 色調はわずかに黄みを帯びた白色で、明度はNW0.5と同等です。

※「セシード® N」、「エステニア® C&B」は、EWシリーズには対応しておりません。

シェードテイキングを正確、容易にするための工夫

- タブに記入されている色調名称は確認しやすいよう、人工歯の近い位置に反射のない塗料で印刷しています。
- 複数の色調をシリーズホルダーごとに取り出せるので、シェードテイキングがスムーズに行えます。
- 天然歯列と平行に位置させやすいよう、人工歯とシェードタブの取り付け角度を工夫しています。
- 人工歯の形態は表面性状を少なくし、色調を選択しやすいよう工夫しています。また、より正確な色調選択ができるよう、ステインは塗布していません。

●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。 ●ご使用に際しましては取扱説明書を必ずお読み下さい。

クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

【販売】株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
お客様相談センター：0800-222-8020
(医療従事者様向窓口)

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

推奨 OS バージョン iOS 14.0 以上 /
Android 9.0 以上



クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!

・「セシード」及び「エステニア C&B」は株式会社クラレの登録商標です。
・「セラビアン」はノリタケ株式会社の登録商標です。

08/2024