

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）
医療機器認証番号：226ABBZX00105000

クリアファイル® セラミックプライマー プラス

1本で様々な補綴装置に適用可能

CAD/CAMレジン冠、ジルコニア、
陶材、硬質レジン、金属まで
使用可能なプライマー



1本で様々な補綴装置に適用可能

「シランカップリング剤」と「MDP[®]」を含有


(一部材料を含む)

光照射不要


シラン カップリング剤



・エステニア[®]C&B
・セシード[®]N

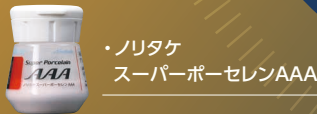

各補綴装置への接着強さ (サーマルサイクル3,000回後)

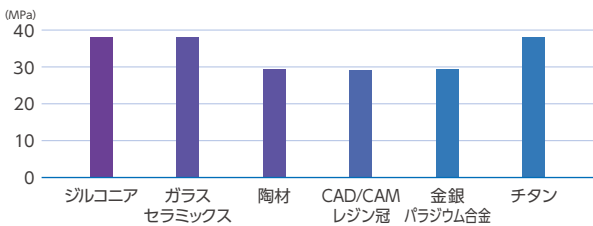

測定条件: サンドブラスト処理 (ジルコニア、金属、CAD/CAMレジン)、#1000研磨 (陶材、ガラスセラミックス)、
被着面積: 5mm²、被着体本品適用後、「パナビア[®] V5 ベース」を塗布して圧接し、マーキング部へ
ペンキュア2000で2方向から10秒光照射
37℃水中浸漬し、サーマルサイクル (4~60℃、3000回) 後、測定 クラレノリタケデンタル (株) 測定
測定装置: オートグラフAGAG-100kN (島津製作所) クロスヘッドスピード: 1mm/min 条件により数値は異なります。

クリアフィル[®] セラミック プライマー プラス

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号: 226ABBZX00105000

【単品】 容量: 4mL × 1個



詳しい使用方法は、
早わかりフローチャート
をご覧ください。



- データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。 ● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- ・「パナビア[®] V5 ベース」 管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号: 226ABBZX00102000
- ・「ADポストII」 整形用品 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器承認番号: 206008ZZ01004000
- ・「クリアフィル[®] ADファイバーポストII」 管理医療機器 歯科根管用ポスト成型品 医療機器認証番号: 301ABBZX00019000
- ・「エステニア[®] C&B」 歯科材料 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器承認番号: 215008ZZ00534000
- ・「セシード[®] N」 歯科材料 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器認証番号: 225ABBZX00173000
- ・「カタナ[®]アベンシア[®]ブロック」 歯科材料 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 226AFBZX00116000
- ・「カタナ[®]アベンシア[®]TPブロック」 歯科材料 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 229AFBZX00091000
- ・「カタナ[®]ジルコニアブロック」 歯科材料 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号: 229AFBZX00049000
- ・「ノリタケカタナ[®]ジルコニア」 歯科材料 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号: 223AFBZX00185000
- ・「ノリタケスーパーポーセレンAAA」 歯科材料 管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用陶材 医療機器認証番号: 223AFBZX00166000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル
0120-330-922
月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ
www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



クラレノリタケデンタル 検索
サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上

・「パナビア」、「クリアフィル」、「MDP」、「セシード」、「エステニア」及び「アベンシア」は株式会社クラレの登録商標です。
・「セラビアン」及び「カタナ」は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。